

Диализатор Diacap® Pro

Максимальная производительность и эффективность

Диализаторы Diacap Pro разработаны для проведения процедур гемодиализа и обеспечивают высокоэффективное очищение крови.

Преимущества

- Постоянный высокий результат клиренса малых и средних молекул, особенно мочевины, фосфата, креатинина и β_2 -микроглобулина
- Минимальная потеря альбумина у диализных пациентов
- Малый объем промывки с легким удалением воздуха и удобная упаковка упрощают работу и помогают уделять больше времени пациенту
- Высокая биосовместимость

Артикул	Наименование
720DL13G	Diacap Pro 13L
720DL16G	Diacap Pro 16L
720DL19G	Diacap Pro 19L
720DH13G	Diacap Pro 13H
720DH16G	Diacap Pro 16H
720DH19G	Diacap Pro 19H




Diacap® Pro high & low flux

Высокопоточные (HI) и низкопоточные (LO) диализаторы

Diacap Pro — это диализатор с полыми волокнами, стенки которых образует мембрана из полисульфона.

Диализаторы Diacap Pro представлены в двух модификациях: низкопоточные (Low Flux) и высокопоточные (High Flux).

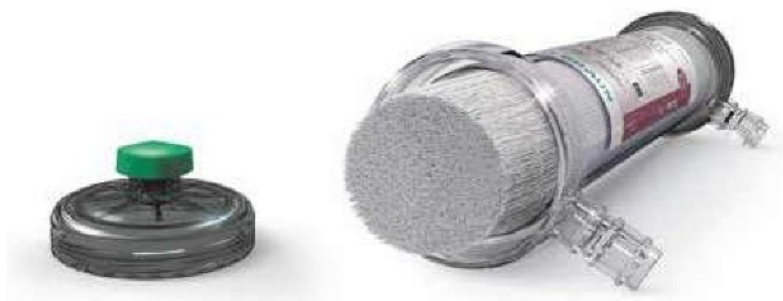

Diacap Pro high flux

Технические данные

		Pro 13H			Pro 16H			Pro 19H		
Поток крови (Q _B) мл/мин		200	300	400	200	300	400	200	300	400
Клиренс	Мочевина	194	263	303	196	270	322	197	280	332
	Креатинин	185	236	269	189	248	284	194	260	305
Поток диализата (D _p) = 500 мл/мин	Фосфат	178	220	249	184	230	261	186	242	278
Скорость ультрафильтрации (Q _f) = 0 мл/мин	Витамин B ₁₂	133	151	167	143	166	183	150	180	202
	Инулин	86	92	101	96	106	116	102	117	128
	Цитохром C	65	73	75	72	81	86	80	90	95
Коэффициент просеивания Q _B = 300 мл/мин Q _F = 60 мл/мин	Инулин	1,0								
	β ₂ -микроглобулин	0,7								
	Альбумин	< 0,001								
Коэффициент ультрафильтрации, мл/ч/мм рт. ст.		70			85			97		
КоА мочевина Q _B = 300 мл/мин		1010			1145			1415		

Diacap Pro low flux

Технические данные

		Pro 13L			Pro 16L			Pro 19L		
Поток крови (Q _B) мл/мин		200	300	400	200	300	400	200	300	400
Клиренс	Мочевина	192	257	295	195	269	310	196	276	321
	Креатинин	182	228	256	189	242	277	193	254	290
Поток диализата (D _p) = 500 мл/мин	Фосфат	150	175	188	158	187	203	167	203	223
Скорость ультрафильтрации (Q _f) = 0 мл/мин	Витамин B ₁₂	90	101	104	102	112	118	109	125	133
	Коэффициент ультрафильтрации, мл/ч/мм рт. ст.	11			14			17		
КоА мочевина Q _B = 300 мл/мин		916			1123			1292		

Diacap Pro low & high flux

Технические данные

Площадь поверхности, м ²	1,3	1,6	1,9
Объем заполнения со стороны крови, мл	82	100	120
Способ стерилизации	Гамма-излучение		
Материал мембраны	α-полисульфон Pro		

Характеристики в соответствии с ISO 8637. Коэффициент ультрафильтрации в соответствии с ISO 8637: бычья кровь, гематокрит 32%, протеин 60 г/л, 37 °C.