


Молотки серии SQ.line – эталон качества!

Точки дискомфорта – сравнение молотков серии SQ.line с изделиями конкурентов



Максимальное
удобство

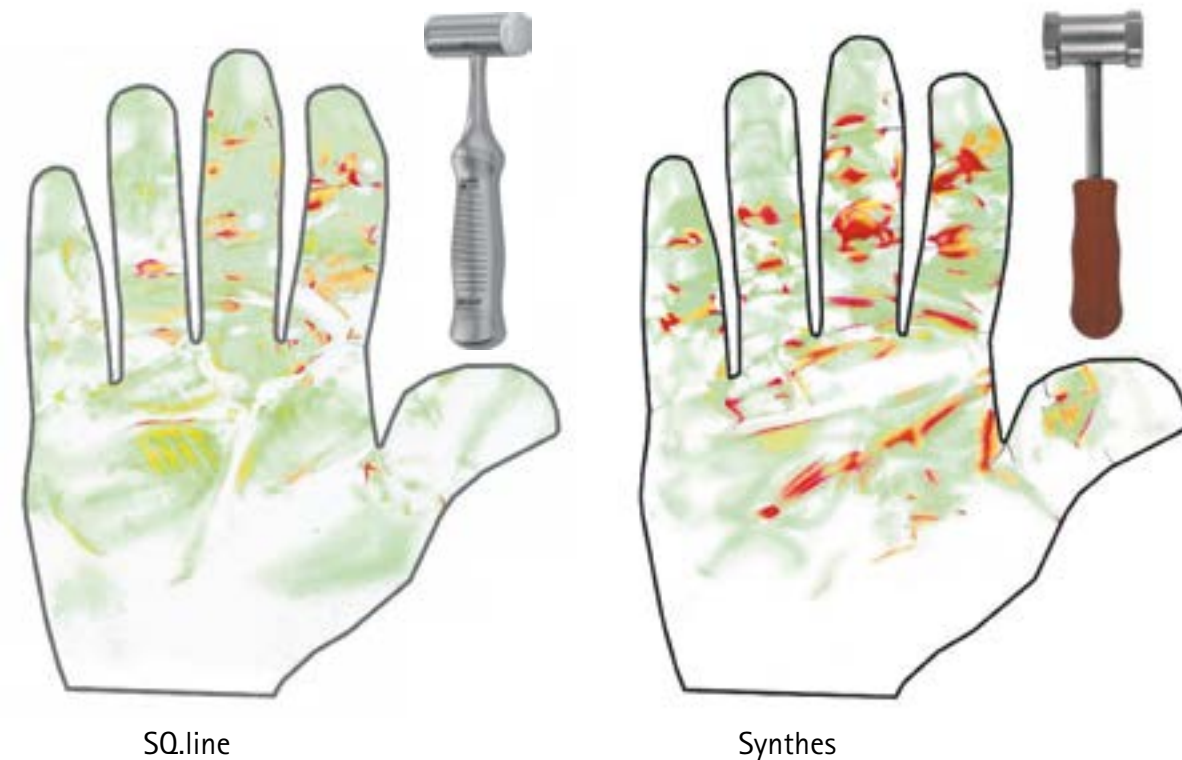


Максимальный
дискомфорт



Методика исследования

1. Специальная чувствительная к давлению пленка была вырезана по размеру и прикреплена к ладони тестирующего.

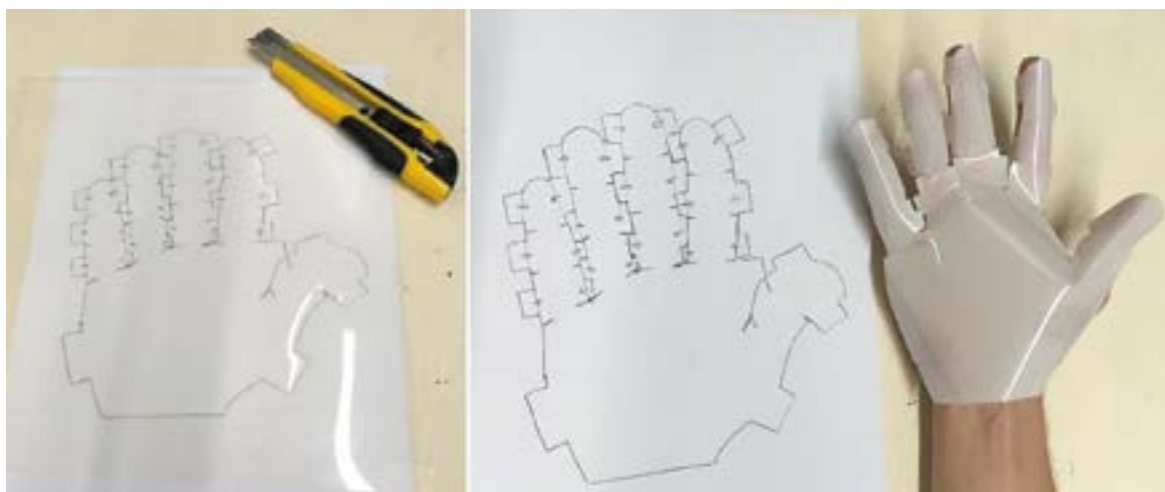

2. Тестирующий (размер ладони «L») захватывал рукоятки двух образцов инструментов. Максимальная сила сжатия прикладывалась к обеим рукояткам. При воздействии давлением на пленку она меняет цвет. Чем выше давление, тем выше плотность окрашивания.



3. Оценка отпечатков



Отпечаток, полученный при тестировании инструмента серии SQ.line



Отпечаток, полученный при тестировании инструмента от компании Synthes

4. Расшифровка отпечатков, характеризующих распределение давления (SQ.line vs. Synthes)



Выводы

При оценке степени комфорта молоток серии SQ.line превзошел своего конкурента от производителя Synthes. Тесты показали:

дизайн рукоятки инструментов серии SQ.line разработан следующим образом: у изделия нет острых граней, что позволяет оптимально **распределить поверхностное давление и снизить количество точек дискомфорта**. Это дает возможность использовать инструмент дольше.

AESULAP® – a B. Braun brand

BMR-C-700358

